


Veillez remplir ce formulaire, l'insérer dans un sac à glissière et l'inclure avec vos échantillons



**Kuster Research and Consulting, Inc.**  
PERFORMED IN CANADA BY DEMETER

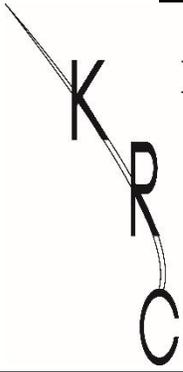

**Demeter Services Vétérinaires inc.**

845, route Marie-Victorin, Porte #12  
Lévis, Québec G7A 3S8  
Tél.: 418 836-0744, poste 240 • Sans frais: 1-877-847-5411  
Fax: 1-855-221-2142  
lab@demetersv.com • www.demetersv.com

**Kuster Research and Consulting, Inc.**  
Atkinson, IL • Phone: 309-944-5044 • Fax: 309-944-5045  
KRC@KusterResearch.com • www.KusterResearch.com

**Informations de facturation**

Nom \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Ville/Prov./Code postal \_\_\_\_\_  
Courriel facturation \_\_\_\_\_  
**Info. d'expédition** Transporteur \_\_\_\_\_  
Date collecte \_\_\_\_\_ Date d'envoi \_\_\_\_\_  
Temp. éch. \_\_\_\_\_°C Temp. extérieure \_\_\_\_\_°C  
**Envoi du rapport à :** \_\_\_\_\_

**Informations du site**

Nom contact \_\_\_\_\_  
Poste occupé \_\_\_\_\_  
Nom du site \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Ville/Prov./Code postal \_\_\_\_\_  
Tél. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Courriel \_\_\_\_\_

**ANALYSES DEMANDÉES**

**Analyses de routine (forfaits) :**

- Analyse complète & culture (Nucleocounter) (inclus motilité, morphologie, concentration totale [Nucleocounter], volume, TSD<sup>1</sup>, culture)
- Analyse complète & culture (CASA) (inclus motilité, morphologie, concentration totale [CASA], volume, TSD<sup>1</sup>, culture)

**Analyses spécifiques :**

- Motilité à la réception     Motilité à l'expiration    |     Morphologie différentielle    |     Morphométrie (CASA)
- Concentration:     CASA     Nucleocounter    |     Viabilité (Nucleocounter)    |     Culture bactérienne
- Autre (demande personnalisée) \_\_\_\_\_

**Veillez identifier tous les échantillons ici-bas, y compris les informations descriptives et les valeurs cibles**

	ID de l'échantillon	Pool/Indv.	Lignée génétique	Date de préparation	Date d'expiration	Dilueur	Vol. ciblé par dose	TSD <sup>1</sup>	VSD <sup>2</sup>	MMN <sup>3</sup>	Tech.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

<sup>1</sup>Total de spermatozoïdes par dose;

<sup>2</sup>Spermatozoïdes «viables» par dose (si applicable);

<sup>3</sup>Morphologie minimale normale

**Notes/Instructions:**



### *Demeter Services Vétérinaires inc.*

845, Marie-Victorin, porte #12  
Lévis, Québec G7A 3S8  
Tél.: 418 836-0744, poste 240 • Sans frais: 1 877 847-5411  
Fax: 1 855 221-2142  
lab@demetersv.com • www.demetersv.com

### *Kuster Research and Consulting, Inc.*

Atkinson, IL • 309-944-5044 • Fax: 309-944-5045  
KRC@KusterResearch.com • www.KusterResearch.com

## **Instructions pour demande d'analyse de semence**

Afin d'obtenir les résultats les plus représentatifs pour chacune de vos analyses de semence, il est important d'éviter au maximum les grandes variations de température lors du transport. **La semence diluée doit être conservée entre 15° et 19°C.** En raison de cette plage relativement étroite, il est préférable d'utiliser deux glacières en polystyrène pour l'expédition de vos échantillons.

Placer un grand sachet de gel (*gel-pack*) (lequel est à la même température que la semence) dans le fond de la première glacière, la plus petite. Emballer les échantillons de semence pré-refroidis dans plusieurs couches de papier journal et placez-les directement sur le sachet de gel. Placez un second sachet par-dessus les échantillons. Du papier-bulle ou toute autre matière peut être utilisée pour occuper l'espace vide et sécuriser les échantillons lors du transport. La petite glacière doit être refermée et insérée dans la 2<sup>e</sup> et plus grande glacière.

- > Si la température extérieure prévue dépasse 30°C, des sachets de gel congelés doivent être placés dans la grande glacière en polystyrène (en dehors de la plus petite glacière contenant les échantillons).
- > Lors de temps plus froid (<4°C), les sachets de gel doivent être réchauffés au micro-onde et placés entre les deux glacières.



Fermer la boîte externe avec un ruban adhésif **et expédier votre colis en livraison Express (pour le lendemain)** à l'adresse ci-bas.

Si vous avez plus de 5 échantillons à analyser et que l'analyse de la motilité est requise à la réception, demandez une livraison Express 10:30 (*Purolator Express 10:30, FedEx First Overnight, UPS Express Early*).

### **Adresse de livraison:**

Laboratoire DSV  
845, route Marie-Victorin, porte #12  
Lévis, Québec G7A 3S8

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

L'équipe du laboratoire Demeter  
1 877 847-5411, poste 240